PHILIPS

HearLink

Charger Plus

nxtCIC R



Instrucțiuni de utilizare

Compatibil cu HearLink 50 nxtCIC R

Introducere la acest ghid de utilizare

Acest ghid de utilizare vă prezintă modul de utilizare și întreținere a noului încărcător.

Citiți cu atenție acest ghid de utilizare, inclusiv secțiunea de **Avertismente**. Astfel veți putea beneficia la maxim de încărcătorul dvs.

⚠ **Avertismente**
Textul marcat cu un simbol de avertizare trebuie citit înainte de a folosi dispozitivul.

Mai multe informații sunt disponibile la www.hearingsolutions.philips.com

Dacă aveți întrebări suplimentare in ceea ce privește utilizarea încărcătorului, adresați-vă specialistului dvs. pentru protezare auditivă.

Pentru a vă ajuta, acest ghid de utilizare conține o bară de navigare care vă ajută să navigați prin diferitele secțiuni.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Pentru detalii privind funcţionarea soluţiei dvs. cu proteză auditivă, vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de utilizare ale protezei auditive.

Cuprins

Despre

Scopul utilizării 6
Încărcător 8
Condiții de temperatură 9

Introducere

Pregătirea încărcătorului 10
Încărcarea protezelor auditive 12

Utilizarea zilnică

Durata de încărcare 14
Încărcarea încărcătorului 16
Funcția de baterie externă 18
Alimentarea și încărcarea din alte surse 20
Îngrijirea încărcătorului 21

Avertismente

Avertismente generale 22

Informații suplimentare

Condiții de utilizare	26
Garanția internațională	32
Garanția	33
Depanarea	34


Scopul utilizării

Scopul utilizării	Încărcătorul este conceput pentru a încărca protezele auditive care conțin baterii reîncărcabile. Produsul este conceput pentru a fi folosit împreună cu soluția auditivă oferită.
Indicații de utilizare	Nu există nicio indicație de utilizare (diagnosticare) pentru încărcătorul în sine.
Utilizatorul produsului	Persoană cu pierdere a auzului care folosește o proteză auditivă și îngrijitorii acesteia. Specialistul pentru protezare auditivă responsabil cu reglarea accesoriului.
Grupul de utilizatori ai produsului	Adulții și copiii cu vârsta peste 36 de luni.
Mediul de utilizare	La interior și exterior. Încărcătorul nu trebuie utilizat sau expus la umezeală sau la medii cu umiditate ridicată.
Contraindicații	Nicio contraindicație.
Beneficii clinice	Consultați beneficiile clinice ale protezei auditive.

Încărcător (CTN: HEA6057)

Ce este și ce face


Cablu USB
Introduceți în ștecăr

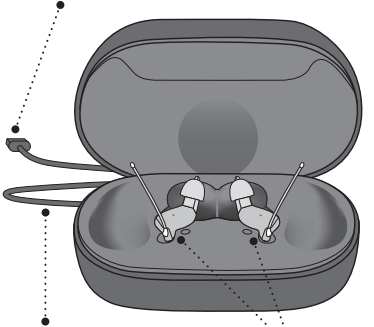

Cablu de alimentare
Alimentare cu curent

Porturi de încărcare
Pentru proteze auditive în timpul încărcării

Ștecăr
Pentru priza de curent

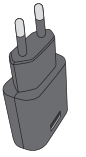



Indicator baterie
Afișează starea încărcării bateriei externe/nivelurile de încărcare a bateriei externe

Condiții de temperatură

Temperatura	Stare de încărcare
Sub +5°C (+41°F)	Nu se încarcă din cauza temperaturii scăzute.
Între +15 °C și +35 °C (între +59 °F și +95 °F)	Cea mai bună stare de încărcare. Încărcarea protezelor auditive poate dura până la 2 ore.
De la +5 °C la +15 °C și de la +35 °C la +40 °C (De la +41 °F la +59 °F și de la +95 °F la +104 °F)	Încărcarea se extinde. Încărcarea protezelor auditive poate dura până la 6 ore.
Peste +40 °C (+104°F)	Nu se încarcă din cauza temperaturii ridicate.


NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Nu expuneți încărcătorul la temperaturi de sub -20 °C (-4 °F) sau de peste +60 °C (+140 °F).

Pregătirea încărcătorului


Conectați la sursa de curent

Pasul 1

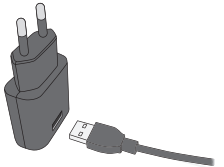


Introduceți mufa USB în ștecăr.

Pasul 2

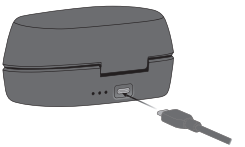

Introduceți celălalt capăt al cablului USB în partea din spate a încărcătorului.


Pasul 3

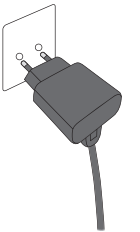

Introduceți ștecărul într-o priză de curent.

Încărcătorul PORNEȘTE automat și începe încărcarea bateriei externe.

Încărcătorul este PORNIT

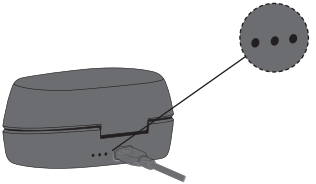

Atunci când încărcătorul este conectat la alimentare, este arătată starea încărcării bateriei externe a încărcătorului.

Prima utilizare – Încărcarea bateriei externe
Atunci când folosiți încărcătorul pentru prima dată, este important să încărcați complet bateria încărcătorului.

Încărcarea protezelor auditive


Puneți protezele auditive în încărcător



Puneți protezele auditive în porturile de încărcare ca în imagine și închideți capacul. Asigurați-vă că protezele auditive sunt așezate conform indicatorilor colorați dreapta și stânga de pe porturile de încărcare ale încărcătorului.

Indicatorul ROȘU marchează proteza auditivă pentru partea dreaptă. Indicatorul ALBASTRU marchează proteza auditivă pentru partea stângă.

Starea încărcării

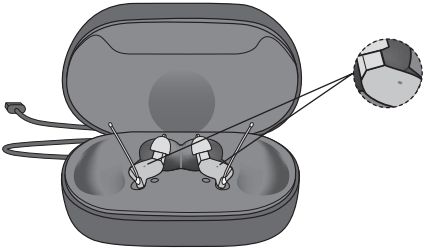

LED-ul protezei auditive se APRINDE când protezele auditive sunt puse corect în încărcător.

Lumina LED-ului pentru starea de încărcare a protezei auditive:

●	Se încarcă - Nivel scăzut al bateriei
●	Se încarcă - Cel puțin 4 ore de utilizare*
○	Complet încărcată

● PORTOCALIU pulsează ● PORTOCALIU ○ VERDE

* Durata de utilizare estimată a bateriei reîncărcabile depinde de modul de utilizare, de setul de funcții active, de pierderea auzului, de mediul sonor, de vechimea bateriei și de utilizarea accesoriilor fără fir.

Durata de încărcare

Asigurați-vă că vă încărcați protezele auditive înainte de prima utilizare și le încărcați după aceea în fiecare noapte. Astfel veți începe ziua cu proteze auditive complet încărcate.

Durata de încărcare poate varia în funcție de capacitatea rămasă a bateriei și între proteza auditivă stânga și cea dreaptă.

Dacă proteza dvs. auditivă are bateria complet golită, duratele normale de încărcare și utilizare sunt:*

Durata de încărcare (minute)	15	30	60	120 (complet)
Durata de utilizare (ore)	4	8	16	20

* Durata de utilizare estimată a bateriei reîncărcabile depinde de modul de utilizare, de setul de funcții active, de pierderea auzului, de mediul sonor, de vechimea bateriei și de utilizarea accesoriilor fără fir.

Când bateria protezelor auditive este încărcată complet, procesul de încărcare se oprește automat.

Puteți utiliza încărcătorul ca o cutie de depozitare pentru protezele auditive ținând capacul închis. În timpul încărcării, când deschideți capacul, LED-urile protezelor auditive se aprind pentru a indica starea încărcării acestora.

Observație
Dacă nu ați folosit proteza auditivă pentru o perioadă mare de timp și apoi încercați să o reîncărcați, poate dura până la 30 de secunde înainte să înceapă încărcarea protezei auditive. Pentru mai multe informații, consultați Instrucțiunile de utilizare ale protezei auditive.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Asigurați-vă că încărcătorul este alimentat sau că acumulatorul inclus în încărcător este încărcat atunci când proteza auditivă este pusă în portul de încărcare. În caz contrar, protezele auditive vor rămâne PORNITE și vor continua să consume bateria.

Încărcarea încărcătorului

Încărcătorul dvs. conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion care are rol și de baterie externă. Acesta vă permite să încărcați complet o pereche de proteze auditive de minim trei ori cu o baterie externă complet încărcată atunci când sunteți în mișcare.

Când încărcătorul este conectat la o sursă de alimentare

- Protezele auditive și bateria încărcătorului sunt încărcate.

Când încărcătorul este deconectat de la o sursă de alimentare

- Încărcătorul intră în modul **Baterie externă**, permițându-vă să vă încărcați protezele auditive în situațiile în care nu aveți acces la o priză de curent.

Durata de încărcare*

Bateria externă	Bateria externă + protezele auditive
Până la 4 ore în funcție de nivelul de încărcare	Până la 6 ore în funcție de nivelul de încărcare

*Condițiile de temperatură pot afecta durata de încărcare.

Observație
Se recomandă să țineți capacul mereu închis în timp ce încărcați protezele auditive.

Atunci când încărcătorul este conectat la o sursă de alimentare, LED-urile de pe încărcător indică starea încărcării bateriei externe.

LED-urile se OPRESC la scurt timp după ce bateria externă s-a încărcat complet.

	Încărcare (baterie prea descărcată pentru a reîncărca protezele auditive)
	Încărcarea
	
	Complet încărcată


 PORTOCALIU pulsează  PORTOCALIU  VERDE

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

La încărcare, indicatorii luminoși ai încărcătorului ar trebui să fie aprinși conform descrierii din această broșură. Dacă indicatorii de încărcare nu sunt aprinși conform descrierii, deconectați încărcătorul și consultați specialistul pentru protezare auditivă.

Funcția de baterie externă

Atunci când încărcătorul este deconectat de la alimentare, LED-urile de pe încărcător indică nivelul bateriei externe a încărcătorului. Puteți verifica nivelul rămas al bateriei prin deschiderea capacului încărcătorului.

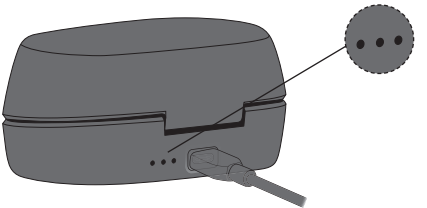

◯◯◯	De la 70 la 100%
◯◯	De la 50 la 70%
◯	De la 35 la 50%
◐	De la 0 până la 35% (bateria este prea descărcată pentru a asigura o zi întreagă de audiție)

◐ PORTOCALIU clipește ◯ VERDE

Depozitarea pe termen lung

Înainte de a pune deoparte sau depozita încărcătorul pentru o perioadă mare de timp (peste 14 zile), asigurați-vă că mai întâi încărcați complet bateria externă a încărcătorului. În acest mod bateria se poate reîncărca din nou.

Observație

Pentru a proteja bateria reîncărcabilă este necesară încărcarea completă a bateriei externe a încărcătorului la fiecare 12 luni, în caz contrar bateria reîncărcabilă va trebui înlocuită.

Alimentarea și încărcarea din alte surse

Puteți alimenta și încărca bateria încărcătorului și din alte surse diferite de o priză de curent. Acest lucru se poate face folosind cablul USB al încărcătorului.

Asigurați-vă că sursa de curent este conformă cu USB 2.0 și oferă minim 500 mA. Pentru o încărcare optimă, utilizați o sursă de curent cu ieșire de 1 A.

Exemple de surse de curent:

- Calculator
- Mașină

Îngrijirea încărcătorului

Asigurați-vă mereu că încărcătorul este uscat și curat înainte de utilizare. Păstrați porturile de încărcare și portul USB-C curate ștergând praful cu lavetă uscată. Nu folosiți apă sau lichide curățare pentru curățarea porturilor de încărcare.

Depozitați încărcătorul într-un loc uscat, de ex. în dormitor.
Asigurați-vă că păstrați încărcătorul într-un mediu cu temperatura între +15 °C și +35 °C (+59 °F și +95 °F).

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Scoateți cablul USB când transportați încărcătorul.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Asigurați-vă mereu că încărcătorul este uscat și curat înainte de utilizare. Păstrați porturile de încărcare și portul USB-C curate ștergând praful cu lavetă uscată. Nu utilizați alte obiecte (de exemplu, bețișoare de bumbac) și nu utilizați apă sau lichide de curățare pentru a curăța porturile de încărcare.

⚠ Avertismente generale

Pentru siguranța dvs. personală și pentru a asigura o utilizare corectă, citiți cu atenție următoarele avertismente generale înainte de a utiliza încărcătorul. Contactați specialistul pentru protezare auditivă dacă apar funcționări neașteptate sau incidente grave cu încărcătorul în timpul utilizării sau datorită folosirii acesteia. Specialistul pentru protezare auditivă vă va ajuta cu problema și, dacă este cazul, va raporta situația producătorului și/sau autorităților naționale.

Porturi de încărcare
Nu introduceți în porturile de încărcare altceva decât proteze auditive reîncărcabile. Alte obiecte pot scurtcircuita încărcătorul și pot provoca arsuri.

Pericol de sufocare ca urmare a ingerării pieselor mici
Țineți toate piesele mici (de exemplu, aparate auditive, căști, baterii etc.) departe de accesul și de vederea copiilor și a altor persoane care ar putea înghiți aceste obiecte.

Solicitați imediat asistență medicală de urgență dacă cineva se sufocă cu piese mici sau dacă sunt înghițite bateriile.

A se ține departe de căldura extremă
Nu vă expuneți niciodată încărcătorul la căldură extremă. De exemplu, nu vă lăsați încărcătorul în interiorul unei mașini parcate la soare. Nu folosiți niciodată un dispozitiv de încălzire extern pentru a vă usca încărcătorul. De exemplu, nu vă uscați încărcătorul folosind un uscător de păr sau într-un cuptor, cum ar fi un cuptor cu microunde.

A se ține departe de substanțe chimice
Țineți-vă încărcătorul la distanță atunci când aplicați produse care conțin anumite substanțe chimice care vă pot deteriora încărcătorul. De exemplu, produse cosmetice, sprayuri de păr, parfumuri, loțiuni de bărbierit, loțiuni de plaja și loțiuni împotriva insectelor.

A se ține departe de mediile cu risc de explozie
Încărcătorul dvs. este sigur să fie utilizat în condiții normale de utilizare. Încărcătorul nu a fost testat pentru conformare cu standardele internaționale în ceea ce privește atmosferele explozive.

Nu folosiți încărcătorul în medii cu risc de explozie, cum ar fi mine, câmpuri petroliere, medii bogate în oxigen sau zone în care sunt manipulate produse anestezice inflamabile.

Nu încercați niciodată să înlocuiți bateriile reîncărcabile
Nu încercați să vă deschideți încărcătorul deoarece puteți deteriora bateria.

Nu încercați să înlocuiți bateria. Dacă este necesară înlocuirea bateriei, returnați dispozitivul la furnizor. Garanția este anulată dacă apar urme de forțare.

Atenție la scurgerile de baterii
Nu atingeți încărcătorul dacă bateria pare să prezinte scurgeri, deoarece acizii pot provoca iritații ale pielii. Dacă ați intrat în contact cu acizii bateriei, ștergeți-vă cu o lavetă umedă.

Dacă apar iritații ale pielii, consultați medicul. În caz de scurgere a bateriei, contactați specialistul pentru protezare auditivă pentru instrucțiuni suplimentare.

Continuare pe următoarea pagină

⚠ Avertismente generale

Conexiune la echipamentul extern
Siguranța încărcătorului când este conectat la un echipament extern cu un cablu USB este stabilită de sursa externă de semnal. Când încărcătorul este conectat la un echipament extern racordat la priza de curent, acest echipament trebuie să respecte standardele de siguranță CEI 62368-1 sau echivalente.

Conectarea încărcătorului la un echipament extern
Dacă conectați încărcătorul protezei auditive utilizând un alt conector USB decât cel furnizat inițial cu încărcătorul, conectorul USB trebuie să respecte standardele CEI 62368-1 sau standardele de siguranță echivalente.

Fiți atenți la mediul înconjurător
Nu utilizați încărcătorul în timp ce conduceți sau în alte situații care necesită întreaga dvs. atenție.

Efecte secundare potențiale
Materialele nealergice utilizate în procesul de fabricare al încărcătorului pot cauza în cazuri rare iritații ale pielii sau alte efecte secundare.

În cazul în care apar aceste afecțiuni, consultați medicul.

Transportul încărcătorului în avion
Consultați linia aeriană în privința detaliilor legate de aducerea încărcătorului protezei auditive la bordul aeronavei.

Încărcați încărcătorul la fiecare 12 luni
Asigurați-vă că încărcați încărcătorul la fiecare 12 luni pentru a preveni o posibilă deteriorare a bateriei în timpul depozitării.

Utilizarea accesoriilor de la terțe părți
Folosiți doar accesorii, cabluri sau traductoare (de exemplu, microfoane) furnizate de producător. Accesoriile neoriginale pot avea ca rezultat reducerea compatibilității electromagnetice (CEM) a încărcătorului.

Scoateți încărcătorul înaintea anumitor proceduri medicale
Scoateți încărcătorul înainte de proceduri medicale, cum ar fi investigații (raze X, CT, RM, PET), electroterapie, intervenții chirurgicale etc. Încărcătorul dvs. ar putea fi afectat dacă este expus la câmpuri magnetice sau electromagnetice puternice.

Conectarea adaptorul de alimentare la priza de curent
Folosiți doar adaptorul de alimentare original furnizat (5,0V/1A) atunci când conectați încărcătorul la o priză.

Condiții de utilizare

Condiții de funcționare	**Temperatură:** De la +5 °C la +40 °C (de la +41 °F la +104 °F) **Umiditate:** De la 5% la 93%, fără condensare **Presiune atmosferică:** de la 700 hPa până la 1060 hPa
Condițiile de transport și depozitare	Temperatura și umiditatea nu va depăși limitele de mai jos în timpul transportării și depozitării: **Temperatură de transport:** De la -20 °C la +60 °C (de la -4 °F la 140 °F) **Temperatura de depozitare:** De la -20 °C la +30 °C (de la -4 °F la 86 °F) **Umiditate:** De la 5% la 93%, fără condensare **Presiune atmosferică:** de la 700 hPa până la 1060 hPa

Pentru informații despre condițiile de utilizare ale protezei auditive, consultați instrucțiunile de utilizare ale protezei auditive.

Încărcătorul dvs. conține un magnet. Dacă aveți un dispozitiv medical cu implant activ, urmați instrucțiunile producătorului dispozitivului medical implantat în ceea ce privește utilizarea acestuia împreună cu magneți. Țineți încărcătorul departe de carduri de credit și alte dispozitive sensibile la magnetism.

Acest dispozitiv medical satisface cerințele Regulamentului privind dispozitivele medicale (UE) 2017/745.

Declarația de conformitate este disponibilă de la sediul central.

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemarca
hearingsolutions.philips.com/doc



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemarca





Deșeurile electronice trebuie manipulate conform legislației locale.



Descrierea simbolurilor care însoțesc produsul	
	**Avertismente** Textul marcat cu un simbol de avertizare trebuie citit înainte de a folosi dispozitivul.
	**Producător** Dispozitivul este realizat de producătorul al cărui nume și adresă sunt menționate lângă simbol. Indică producătorul dispozitivului medical, astfel cum este definit în Regulamentul UE 2017/745.
	**Marcaj CE** Dispozitivul se conformează tuturor regulamentelor și directivelor UE obligatorii.
	**Deșeurile electronice (WEEE)** Reciclați protezele auditive, accesoriile sau bateriile conform reglementărilor locale. Utilizatorii protezei auditive pot returna deșeurile electronice la specialistul dvs. pentru protezare auditivă pentru a fi aruncate. Echipament electronic acoperit de Directiva 2012/19/UE privind deșeurile și echipamentele electrice (WEEE).
	**Marcajul de conformitate cu organismul de reglementare (RCM)** Dispozitivul respectă cerințele privind siguranța electrică, CEM și spectrul radio pentru dispozitivele pentru piețele din Australia sau Noua Zeelandă.
	**A se păstra uscat** Indică un dispozitiv medical care trebuie protejat de umezeală.
	**Numărul de catalog** Indică numărul de catalog al producătorului pentru a identifica dispozitivul medical.

Descrierea simbolurilor care însoțesc produsul	
SN	**Numărul de serie** Indică numărul de serie al producătorului pentru a identifica un anumit dispozitiv medical.
MD	**Dispozitiv medical** Dispozitivul este un dispozitiv medical.
⎓	**Tipul tensiunii de alimentare** Indică faptul că tipul tensiunii de alimentare a dispozitivului va fi CC (curent continuu).
	**Simbolul de reciclare a bateriei** Simbol de reciclare a bateriei Li-ion.
	**Limita de temperatură** Indică limitele de temperatură la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță.
	**Limitarea umidității** Indică intervalul de umiditate la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță.
FW	**FW** Versiunea firmware folosită la dispozitiv.
UDI	**Identificator unic al dispozitivului** Indică un transportator care conține informații privind identificatorul unic al dispozitivului.

Descrierea simbolurilor care însoțesc produsul	
	**Marcajul de certificare pentru Coreea (KC)** Dispozitivul este conform cu cerințele coreene privind siguranța produselor pentru echipamente electrice și electronice.
	**CTN** Număr comercial de schimb

Declarația REACH:

REACH solicită Philips Hearing Solutions să ofere informațiile privind conținutul substanțelor chimice pentru Substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) dacă acestea sunt prezente în cantități mai mari de 0,1 % din masa articolului. Nicio substanță din lista REACH SVHC aplicabilă la momentul producției nu este prezentă în produsul HearLink. Mai multe informații recente se găsesc pe site-ul web hearingsolutions.philips.com/REACH.

Garanția internațională

Dispozitivul este acoperit de o garanție internațională eliberată de producător. Aceasta garanție internațională acoperă defectele de fabricare și de material ale dispozitivului, însă nu și accesoriile, cum ar fi bateriile, tuburile, difuzoarele, piesele auriculare și filtrele, etc. Problemele cauzate de manevrarea sau întreținerea inadecvată sau incorectă, accidente, reparații făcute de persoane neautorizate, expunerea la condiții corozive, modificări fizice din urechea dvs., obiecte străine introduse in proteza auditivă, sau reglările incorecte NU sunt acoperite de această garanție internațională și o pot anula. Garanția internațională de mai sus nu afectează drepturile legale pe care le aveți în conformitate cu legislația națională în vigoare care reglementează vânzarea bunurilor de consum din țara în care ați cumpărat dispozitivul. Specialistul pentru protezare auditivă poate emite și acesta o garanție care depășește clauzele acestei garanții internaționale. Vă rugăm să consultați specialistul pentru protezare auditivă pentru mai multe informații.

Dacă aveți nevoie de service
Duceți dispozitivul la specialistul dvs. pentru protezare auditivă, care ar putea să soluționeze imediat problemele și reglajele minore. Specialistul pentru protezare auditivă vă poate factura pentru serviciile sale.

Garanția

Certificat

Numele clientului: _____

Specialistul pentru protezare auditivă: _____

Adresa specialistului pentru protezare auditivă:_____
_____

Numărul de telefon al specialistului pentru protezare auditivă: _____
_____

Data achiziționării: _____

Perioada de garanție: _____ Luna: _____

Model stânga:_____ Nr. serie: _____

Model dreapta: _____ Nr. serie: _____

Depanarea

Simptome	Cauze posibile
Protezele auditive nu PORNESC după ce sunt scoase din încărcător.	Încărcătorul nu a PORNIT protezele auditive.
	Bateria din încărcător este foarte slab încărcată și insuficientă pentru a PORNI protezele auditive.
Protezele auditive nu se încarcă când sunt introduse în încărcător.	Protezele auditive nu sunt introduse corect.
Două LED-uri ale încărcătorului clipesc PORTOCALIU.	Temperatura protezei auditive sau a încărcătorului este prea mică sau prea mare.
Trei LED-uri ale încărcătorului clipesc PORTOCALIU.	Eroare de sistem.
LED-urile încărcătorului rămân OPRITE când încărcătorul este conectat la o sursă de curent.	Încărcătorul nu se încarcă.
LED-ul cel mai îndepărtat de conectorul USB rămâne PORTOCALIU, LED-ul din mijloc este OPRIT, iar LED-ul cel mai apropiat de conectorul USB clipește PORTOCALIU.	Încărcătorul are o conexiune defectă la baterie.

Soluții
Introduceți protezele auditive în încărcător. Închideți și deschideți capacul și încercați din nou.
Introduceți protezele auditive în încărcător. Conectați încărcătorul la sursa de alimentare pentru a încărca.
Asigurați-vă că protezele auditive sunt introduse corect. Dacă simptomele persistă, contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.
Mutați încărcătorul și proteza auditivă într-un loc cu o temperatură între +5 °C și +40 °C (între +41 °F și +104 °F).
Contactați specialistul pentru protezare auditivă.
Verificați dacă ștecărul este conectat corect. Asigurați-vă că sursa de curent are putere suficientă pentru încărcător.
Conectați la sursa de curent pentru a continua încărcarea protezelor auditive. Contactați specialistul pentru protezare auditivă.

Continuare pe următoarea pagină

Depanarea

Simptome	Cauze posibile
LED-ul protezei auditive pulsează în PORTOCALIU atunci când proteza auditivă este pusă în încărcător, dar nu PORNEȘTE atunci când este scoasă din încărcător.	Bateria este foarte slab încărcată și insuficientă pentru a PORNI proteza auditivă.
LED-ul protezei auditive rămâne STINS când proteza auditivă este pusă în încărcător.	Încărcătorul nu este PORNIT.
	Temperatura protezei auditive sau încărcătorului este prea mare sau prea mică.
	Încărcarea s-a terminat. Încărcătorul a oprit încărcarea pentru a proteja bateria.
	Proteza auditivă nu este așezată corect în încărcător.
LED-ul protezei auditive clipește PORTOCALIU când proteza auditivă este pusă în încărcător.	Eroare de sistem.

Soluții
Introduceți proteza auditivă în încărcător pentru a continua încărcarea.
Verificați dacă ștecărul încărcătorului este conectat corect sau dacă bateria externă este încărcată suficient.
Mutați încărcătorul și proteza auditivă într-un loc cu o temperatură între +5 °C și +40 °C (între +41 °F și +104 °F).
Introduceți din nou proteza auditivă în încărcător.
Verificați porturile de încărcare de prezența obiectelor străine.
Contactați specialistul pentru protezare auditivă.

Distribuitor în România:
SC Audiogram SRL
Cluj-Napoca, Calea Moților, nr 14
(+40)773.801.809

287261RO | 2025.10.31 | v1

8,15 mm

Placeholder
for FSC logo

FSC

MIX

Paper

FSC® C043970

21 mm

15 mm

9,0 mm

hearingsolutions.philips.com

Philips și Emblema Scutul Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt folosite sub licență. Acest produs a fost fabricat de către sau pentru și este vândut sub răspunderea a SBO Hearing A/S și SBO Hearing A/S este garantul pentru acest produs.

0000287261000001

287261 RO | 2025.10.31 | v1